



## 【サイズスタンダードの追加設定につきまして】

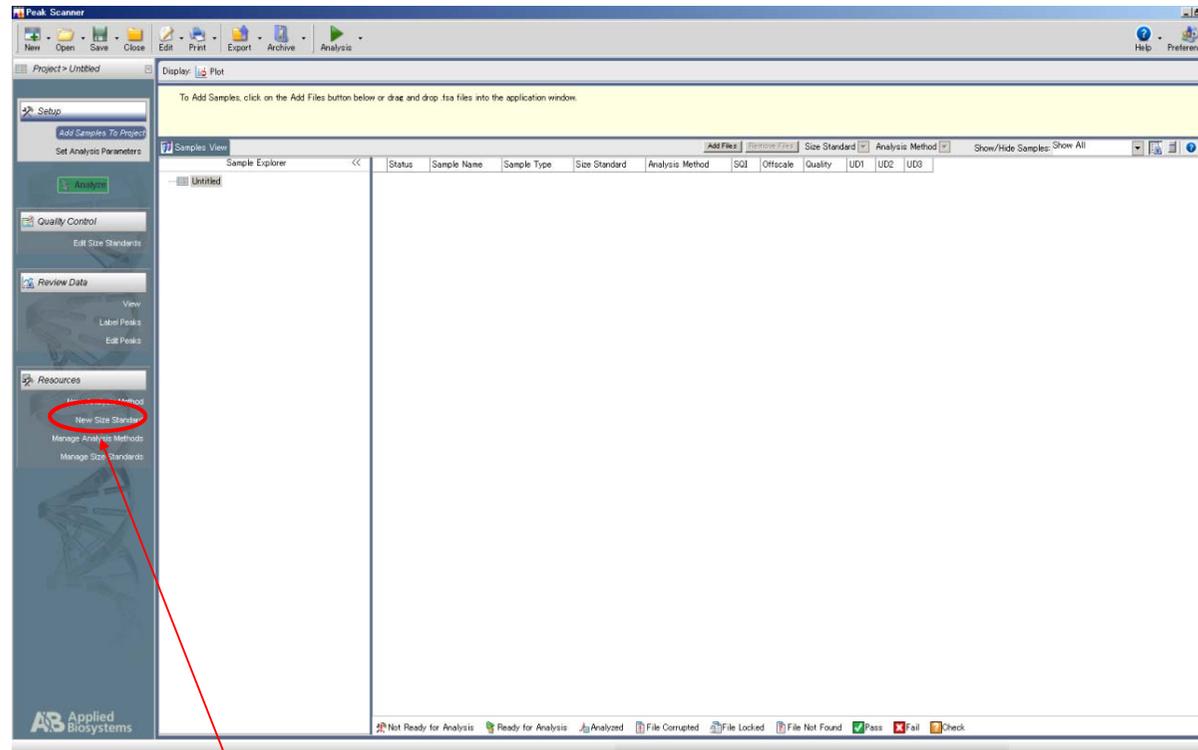

上図画面左側のNew Size Standardをクリックし、  
下図のSize Standard Editorを開けます。

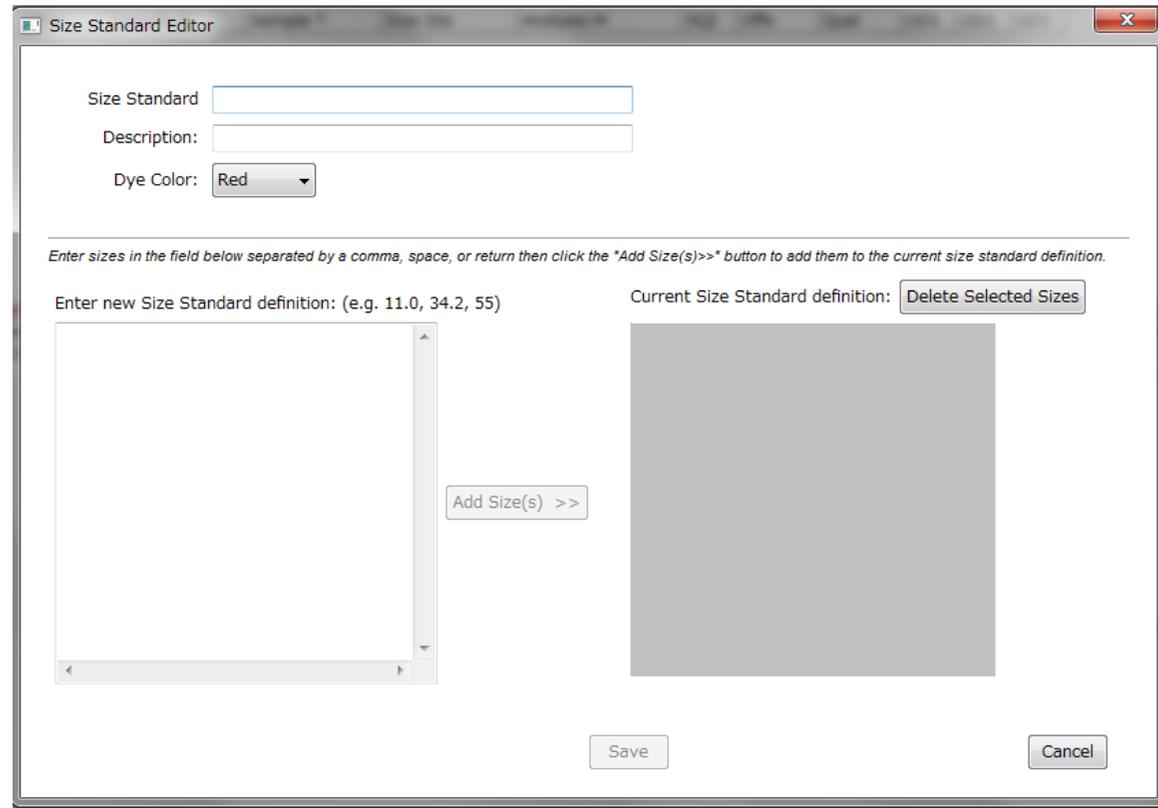

「Size Standard」に1200LIZと記入し、また「Dye color」には「Orange」を選択します。  
「Enter new Size Standard definition」に1200LIZのサイズ値(下記参照)を入力します。

【1200LIZ】

「20,30,40,60,80,100,114,120,140,160,180,200,214,220,240,250,260,280,300,314,320,340,  
360,380,400,414,420,440,460,480,500,514,520,540,560,580,600,614,620,640,660,680,700,  
714,720,740,760,780,800,820,840,850,860,880,900,920,940,960,980,1000,1020,1040,1060,  
1080,1100,1120,1160,1200」

サイズスタンダード「ILS500」,「ILS600」を設定する場合、  
下記のDye colorとサイズ値を入力します。

**【ILS500】**

Size Standard : ILS500

Dye color : Orange

Enter new Size Standard definition :

「60,65,80,100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,  
400,425,450,475,500」

**【ILS600】**

Size Standard : ILS600

Dye color : Red

Enter new Size Standard definition :

「60,80,100,120,140,160,180,200,225,250,275,300,325,350,375,400,  
425,450,475,500,550,600」