

お客様各位



2026年7月21日

プリマハムグループ

株式会社つくば食品評価センター

検査試薬事業部

「アレルゲンアイ® イムノクロマト 加熱用」リニューアルについて

株式会社つくば食品評価センターは、食物アレルゲン検査キット『アレルゲンアイ イムノクロマト 加熱用』をリニューアルいたしますのでご案内申し上げます。

■ リニューアルのポイント：沸騰水を使用しない抽出方法が選べる！

従来の「沸騰水抽出法」はそのままに、新たに「ボルテックスミキサー抽出法」が選択できるようになりました。検体の性質や検査環境に合わせて、2つの抽出方法を使い分けていただけます。

抽出方法	検出感度	特徴・メリット
沸騰水抽出法（従来通り）	食品中 2ppm	国内最高レベルの高感度。従来通りの手順で検査可能。
ボルテックスミキサー抽出法（新設）	食品中 5ppm	新添加液を使用し、30 秒の撹拌で完了。やけどの心配不要。

■ 開発の背景とボルテックスミキサー抽出法のメリット

本製品は、抽出液を加えて沸騰水で10分間加熱することでアレルゲンをしっかり抽出し、食品中 2ppm という高い検出感度を実現した検査キットです。その精度の高さから、多くのお客様にご愛用いただいております。

一方で、従来の沸騰水抽出法には「やけどのリスクがある」「粉末など、加熱によって固化し検査溶液が得られない検体がある」といった課題への声も寄せられておりました。そこで今回、沸騰水を使用しない新たなアプローチとして「ボルテックスミキサー抽出法」を開発いたしました。キットに新しく付属する「ボルテックス抽出用添加液（特許出願中）」により、加熱しなくてもアレルゲンを効率よく抽出することが可能です。本添加液を加え、ボルテックスミキサーで30秒撹拌するだけで抽出が完了するため、より安全かつスピーディに検査を行えます。

■ 今後のご利用について

従来の沸騰水抽出法の手順に変更はございませんので、これまで通りのキットとしてもご使用いただけます。今回のリニューアルにより、お客様の多様な検査ニーズにより柔軟にお応えしてまいります。


今後とも「アレルゲンアイ®」シリーズをご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■ リニューアルの内容

①リニューアル品の出荷時期


2026年8月3日（月）出荷分より

②検査手順と検出感度

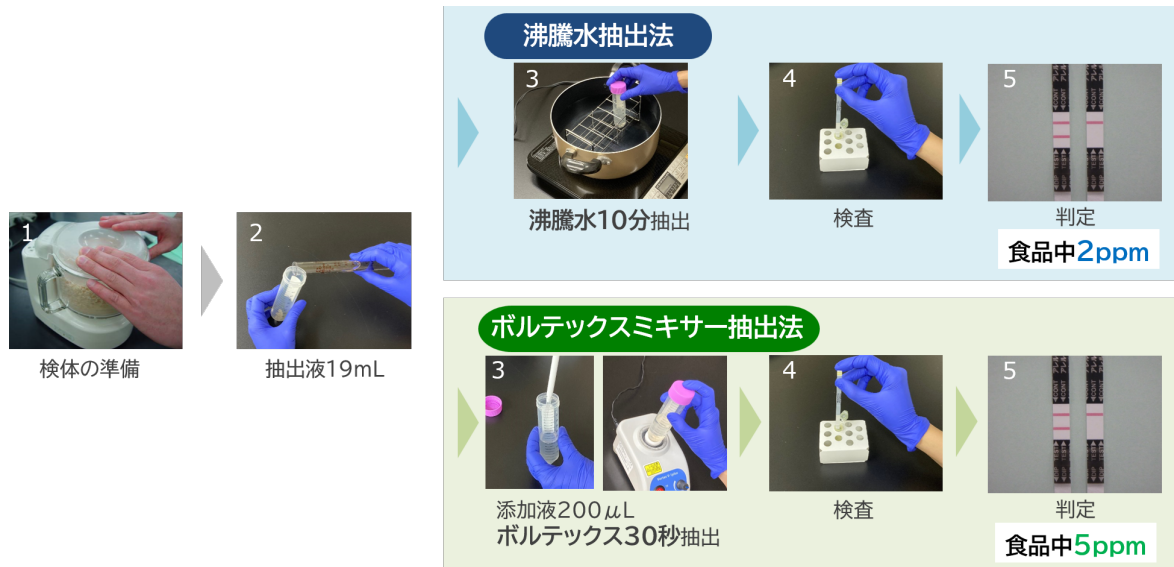

③「ボルテックス抽出用添加液」の追加

「ボルテックス抽出用添加液」（チャック付き袋入り）が追加となります。ボルテックスミキサー抽出法を選択されるお客様は、チャック付き袋内の「G:取扱説明書」をご確認の上、「F:ボルテックス抽出用添加液」をご使用ください。変更となった商品にはお知らせ紙を同封するとともに、キット外箱にラベルを貼付しております（④参照）。

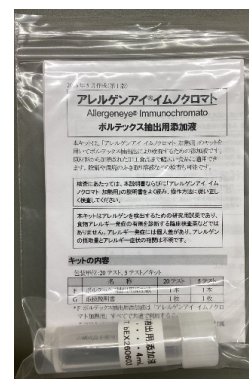

④リニューアル品のキット外箱にラベルを貼付

「ボルテックス抽出用添加液」が封入されたキットは下記写真のようにラベルが貼り付けられています。

案内ラベル貼付 →



■ 商品情報について

①リニューアル対象商品一覧

商品コード・価格ともに変更ございません。

アレルゲンアイ イムノクロマト 加熱用	20 回用		5 回用	
	商品コード	本体価格	商品コード	本体価格
卵	034806	32,000 円 (税込 35,200 円)	035035	12,000 円 (税込 13,200 円)
牛乳 (カゼイン)	034811		034963	
牛乳 (ホエイ)	034816		034984	
小麦	034845		035001	
そば	034874		035019	
落花生	034900		035022	
甲殻類	034903		035030	
くるみ	074083		073979	
大豆	080946		080954	
ごま	080941		080944	
アーモンド	023176		023312	
カシューナッツ	062484		062497	

②イプロス紹介ページ

アレルゲンアイ イムノクロマト加熱用 リニューアル 紹介ページ

イプロス紹介ページ: <https://mono.ipros.com/product/detail/2001642718/>

③パンフレットおよび安全データシートのデータ

下記のリンク先からダウンロード可能です。

<https://ent.box.com/s/d7x52gyeom02kxhpud74y0mjrgqnoo0>

■ 本案内のお問い合わせ先



製造販売元：プリマハムグループ

株式会社つくば食品評価センター

検査試薬事業部

〒300-0841 茨城県土浦市中向原 635

TEL：029-841-8950

E-mail：Allergeneye@primaham.co.jp

以上